Regionaal Laboratorium
Medische Microbiologie
Dordrecht | Gorinchem

RLM

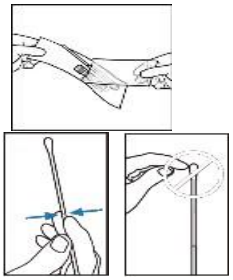
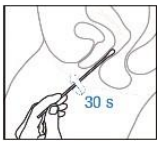
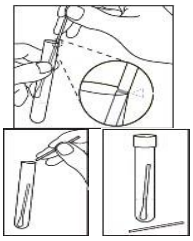
Afname-instructie voor
Vaginale uitstrijk N.gonorrhoeae/*Chl. trachomatis*

(eventueel afname door patiënt zelf)



Afnamesetje: eSwab met oranje buis

Vagina uitstrijk :

1. Voorbereiding -Was uw handen. -Open de verpakking. -Haal de wattenstok uit de verpakking. -Zorg dat de wattenstok niets aanraakt. **Let op**: De wattenstok **boven** het gekleurde breekpunt vastpakken om de uitstrijk te maken.	
2. Afname van vagina uitstrijk -Gebruik de droge wattenstok voor het maken van een uitstrijk van de vagina. -Breng de wattenstok tot het gekleurde breekpunt in de vagina - Draai voorzichtig de wattenstok 30 seconden rond. Zorg ervoor dat de wattenstok de vaginawanden raakt. -Na afname de wattenstok uit de vagina halen.	
3.-Pak het plastic buisje met vloeistof en **draai de dop eraf**. Let op: er zit al vloeistof in het buisje, laat deze vloeistof niet eruit vallen. -Plaats de wattenstok in de buis en breek de wattenstok voorzichtig op het gekleurde breekpunt af. -Het afgebroken stuk in uw hand mag weggegooid worden. -Schroef de dop terug op de buis. -Voorkom lekkage door de dop goed aan te draaien!	
4. Bij gebruik van aanvraagformulier: Schrijf op de buis: -de naam en geboortedatum van de patiënt -herkomst/ afnameplaats van het materiaal Of Maak elektronische order aan: Plak ordersticker met naam en geboortedatum op de buis Vermeld herkomst/ afnameplaats van het materiaal op de sticker. Verzend/ breng de buis met aanvraagformulier/order (klinische gegevens, evt. antibiotica in de laatste 48 uur, zwanger ja/nee) naar het RLM	